


## KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3

Klicka på bilderna för större format



KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3

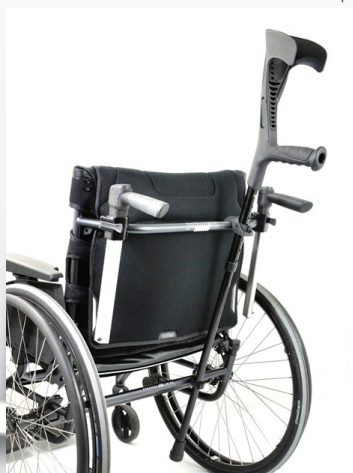

KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3



LÄNK TILL  
DEMOVIDEO

### KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3 - NYTT TILLBEHÖR [länk](#)

Panthera lanserar en egendesignad kryckkäppshållare.

Hållaren består av två delar som enkelt monteras på kryckan. Den övre delen hakar fast i rygstödsbågen och den undre fäster med en magnet mot chassiröret.

Fördelen med denna kryckkäppshållare är att det inte blir någon extravikt på rullstolen samt att kryckan blir mycket enkel att sätta fast och lossa på rullstolen. Kryckan sitter också mycket stadigt fast på rullstolen.

Passar till kryckkäppar med diameter 19 till 22 mm (övre fäste) och 16 till 19 mm (nedre fästet)

Material: Förstärkt polyamid med infälld magnet

Vikt: 46g / krycka

art.nr. 9900301

Kryckkäppshållare S3